


EBU-4000


eletroforese



eletroforese

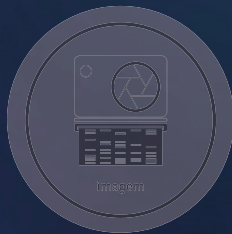


eletroforese

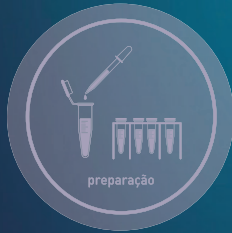

preparação



quantificação

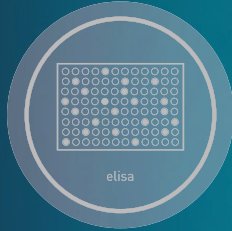

elisa

 loccus

SISTEMA SEMI-SECO DE TRANSFERÊNCIA

EBU-4000

aplicações PROTEÍNAS DNA/RNA

- Western blots
- Northern blots
- Southern blots



Ideal para transferências de géis de 0,25mm a 10mm de espessura.

Transferência de amostras para nitrocelulose, nylon ou PVDF.

Catodo de aço inoxidável e anodo de titânio recoberto de platina resistentes e livres de corrosão.

Compartimento do eletrodo superior separado da base a fim de permitir o ajuste manual da altura desejada da montagem.

Transfere proteínas com peso molecular abaixo de 90kDa

Compatível com Westen, Northern e Southern blots.

Dispersão uniforme de calor.

O SISTEMA EBU-4000 INCLUI:

- Câmara de blotting (transferência);
- Cabos de conexão (vermelho e preto);
- Manual de instruções totalmente em Português.



SISTEMA SEMI-SECO
DE TRANSFERÊNCIA

EBU-4000

inclui

- Câmara de blotting (transferência);
- Cabos de conexão (vermelho e preto);
- Manual de instruções totalmente em Português.

acessórios opcionais

- fonte de eletroforese LPS 300HC

MODELOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

modelo	EBU-4000
dimensões da área de transferência	20 x 20cm
transferências simultâneas	até 4 géis de até 10x10cm
membranas compatíveis	nitrocelulose, nylon, PVDF, papel
volume de tampão de transferência	20mL
ensaios compatíveis	Western, Southern e Northern Blots
limites máximos de energia	1200mA / 75V
dimensões (larg. x comp. x alt.)	26cm x 26cm x 7cm