
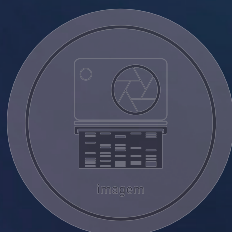
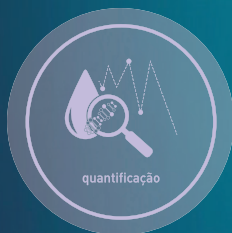


EXTRACTA KIT FAST - MVXA-P016FAST


kit de extração de DNA e RNA viral

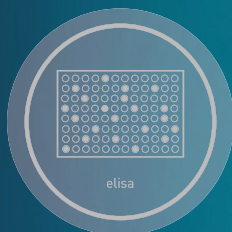

 loccus

KIT DE EXTRAÇÃO MAGNÉTICA DE DNA E RNA VIRAL

EXTRACTA KIT FAST MVXA-P016FAST

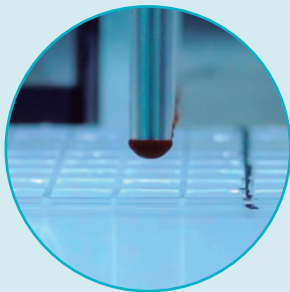


Purificação por beads magnéticas

Processo que facilita o isolamento dos ácidos nucleicos do restante da solução. Dispensa a necessidade de centrifugação ou de filtração. Resulta em alto rendimento e nível de pureza do ácido nucleico purificado.



Kits de placas com reagentes

Placas envasadas que excluem a necessário de preparação do kit. Basta abrir o lacre da placa, aplicar as amostras nos poços correspondentes e colocar no equipamento para a extração automatizada.

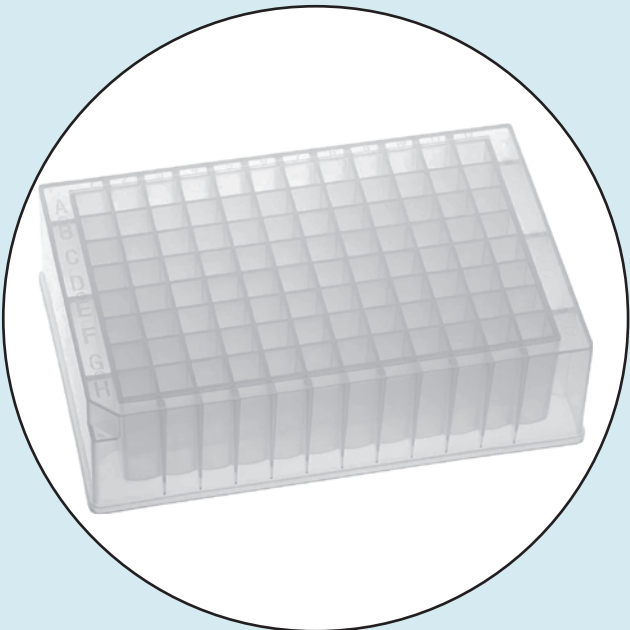

Placas deepwell de 96 poços

Em material de polipropileno e com capacidade para 2,2mL

purificação de DNA e RNA viral

VANTAGENS

- Pronto para usar: retire os lacres, pipete as amostras e insira as placas no extrator
- Permite uso em plataforma Plug&Play
- Processamento automatizado de 16 ou 32 amostras simultâneas em 30 minutos

ESPECIFICAÇÕES

modelo	EXTRACTA KIT FAST - DNA e RNA Viral
código	MVXA-P016FAST
quantidade de amostras	16 ou 32 amostras simultâneas
tipos de amostras	soro, swab em meio líquido ou suspensão em meio PBS, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, fluidos corpóreos, entre outros
volume de amostra	100µl
tipos de vírus	vírus da dengue, zika virus, SARS-CoV-2, influenza, hepatite B ou C, HPV, outros vírus (de DNA ou RNA)
tempo de processamento	30 minutos
apresentação do kit	reagentes aplicados em placas deepwell de 96 poços
ácido nucleico purificado	DNA/RNA viral
rendimento médio	variável
razão 260/280	variável



EXTRACTA KIT FAST MVXA-P016FAST

Kit para extração e purificação de DNA e RNA virais por partículas magnéticas, sem a necessidade de centrifugação ou filtração.

Ideal para a extração e purificação de DNA e RNA viral de amostras clínicas de vários causadores de viroses, como os vírus da dengue, HIV, chikungunya, influenza e SARS-CoV-2.

Compatível com plataforma de automação de extração por beads magnéticas de diversos fabricantes (recomendado: Extracta 16 e Extracta 32, Loccus).

Kit suficiente para o processamento de 96 amostras virais.

Extração de 16 ou 32 amostras simultâneas.

Apresentação do kit: placas deepwell de 96 poços.

MODELO: EXTRACTA KIT FAST – MVXA-P016FAST
MARCA/FABRICANTE: Loccus
PROCEDÊNCIA: Brasil
VALIDADE: 12 meses



Kit para o processamento total de 96 amostras

São 6 placas com reagentes e 12 tiras plásticas descartáveis. Inclui os reagentes de tampão de lise e beads magnéticas para adição das amostras, enzima Proteinase K, tampões de lavagem e solução de Eluição.



Compatível com robôs para extração automatizada

O kit MVXA-P016FAST pode ser utilizado em plataformas de extração automatizadas por beads magnéticas compatíveis com placas de poços fundos para extração simultânea de 16 ou 32 amostras, como os equipamentos **EXTRACTA 16** e **EXTRACTA 32**, marca **Loccus**.



KIT DE EXTRAÇÃO MAGNÉTICA
DE DNA E RNA VIRAL

EXTRACTA KIT FAST MVXA-P016FAST