


EXTRACTA KIT – MVXA-PU96 FAST C


kit de extração de DNA e RNA viral

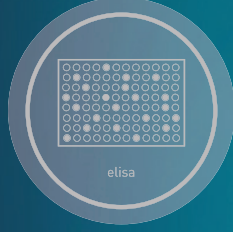

 loccus

KIT DE EXTRAÇÃO MAGNÉTICA DE DNA E RNA VIRAL


EXTRACTA KIT – MVXA-PU96 FAST C

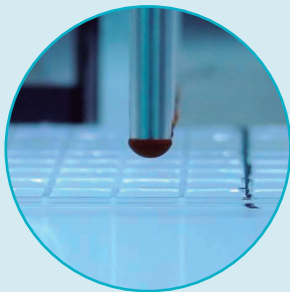

Purificação por beads magnéticas
Processo que facilita o isolamento dos ácidos nucleicos do restante da solução. Dispensa a necessidade de centrifugação ou de filtração. Confere em alto rendimento e nível de pureza do ácido nucleico purificado.



Kits de placas com reagentes
Placas envasadas que excluem a necessidade de preparação do kit. Basta abrir o lacre da placa, aplicar as amostras nos poços correspondentes e colocar no equipamento para a extração automatizada.

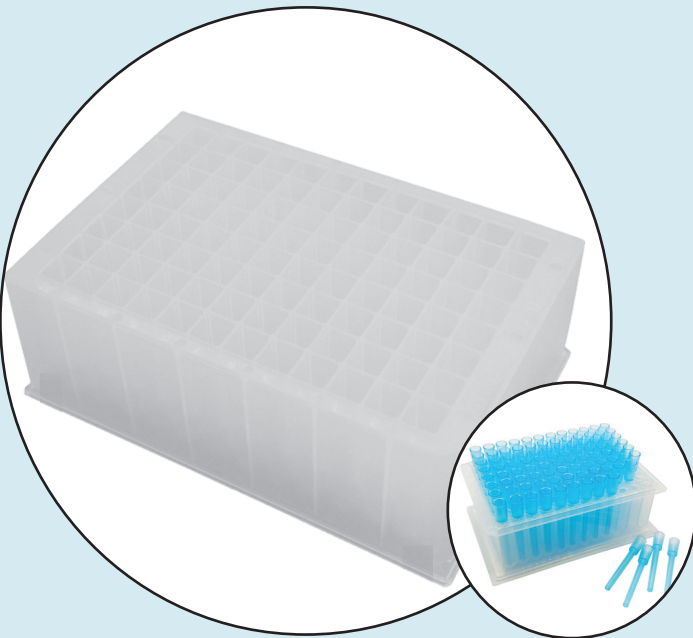

Placas deepwell de 96 poços

Em material de polipropileno e com capacidade para 2,2mL

VANTAGENS

Procedimento automatizado:

- Reduz o risco de contaminação;
- Extrações com alto grau de pureza;
- Rapidez e facilidade na execução;
- Elimina a etapa de pipetagem dos reagentes;
- Economiza o uso de consumíveis;
- Permite o uso em plataformas Plug&Play;
- Compatível com qualquer sistema de detecção.



PURIFICAÇÃO DE DNA E RNA VIRAL

ESPECIFICAÇÕES

modelo	EXTRACTA KIT FAST C - DNA e RNA Viral
código	MVXA-PU96 FAST C
quantidade de amostras	96 amostras simultâneas
tipos de amostras	soro, swab em meio líquido ou suspensão em meio PBS, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, escarro, fluidos corpóreos, entre outros
volume de amostra	100µL
tipos de vírus	vírus da dengue, zika virus, SARS-CoV-2, influenza, hepatite B ou C, HPV, outros vírus (de DNA ou RNA)
tempo de processamento	29 minutos
apresentação do kit	reagentes aplicados em placas deepwell de 96 poços fundo “U”
ácido nucleico purificado	DNA/RNA viral
rendimento médio	variável
razão 260/280	variável



Kit para o processamento total de 96 amostras

São 4 placas com reagentes e TIPs plásticas descartáveis. Inclui os reagentes de tampão de lise e beads magnéticas para adição das amostras, enzima Proteinase K, tampões de lavagem e solução de Eluição.

EXTRACTA KIT – MVXA-PU96 FAST C

Kits para extração e purificação de DNA, RNA e Proteínas por partículas magnéticas, sem a necessidade de centrifugação ou filtração.

Permite a utilização automatizada. Compatível com plataforma de automação de extração por beads magnéticas de diversos fabricantes (recomendado para Maelstrom 9600).

Kit suficiente para o processamento de até 96 amostras.

Extração de 96 amostras simultâneas.

MARCA/FABRICANTE: Loccus

PROCEDÊNCIA: Brasil

VALIDADE: 12 meses

REGISTRO DO M.S.: DISPENSADO



KIT DE EXTRAÇÃO MAGNÉTICA
DE DNA E RNA VIRAL
EXTRACTA KIT -
MVXA-PU96 FAST C